

**Utfolding:**

- A** Låsebøyle på.  
Press opp for å åpne.
- B** Press setestagene ut og ned til rullatoren låses i brukerposisjon.

**Sammenfolding:**

- C** Trekk i stroppen og fold sammen.
- D** Press låsebøylen over det andre setestaget for å låse.

**Parkeringsbrems:**

- E** Skyv *begge* hendler helt ned.  
Klem opp for å oppheve.

**Kjørebrems:**

- F** Klem *begge* hendler opp.

**Vippefunksjon:**

- G** Trå på pedal ved hjul og vipp rullatoren over terskler, kanter, o.l.

**Høydeinnstilling av håndtak:**

- H** Løsne låseratt.
- I** Juster høyden på håndtaksrøret.
- J** Skru låseratt godt til igjen.

**Se i brukerveiledningen:**

- Høydejustering med minne.
- Sikkerhet.
- Feilsøking og annen informasjon.

Ved feil eller spørsmål, kontakt din hjelpemiddelsentral, forhandler eller produsent.

In case of faults or questions, please contact your mobility shop, dealer or manufacturer.

Bei Mängeln oder Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler / Sanitätshaus oder Produzenten.



NO

NO

ENG

ENG

DE

DE

OTHER  
LANGUAGES:  
WWW.  
TOPRO.NO

OTHER  
LANGUAGES:  
WWW.  
TOPRO.NO


RULLATOR  
ROLLATOR  
ROLLATOR



BRUKSANVISNING  
DIRECTIONS FOR USE  
SCHNELLEINFÜHRUNG

**TP**  
**TOPRO**  
TOTENPRODUKTER AS  
RAMBEKKVN.1 PB 428  
N - 2803 GJØVIK  
TLF (+47) 61 13 46 00  
FAX (+47) 61 17 92 05  
POST@TOPRO.NO  
WWW.TOPRO.NO

**TP**  
**TOPRO**  
TOTENPRODUKTER AS  
WWW.TOPRO.NO

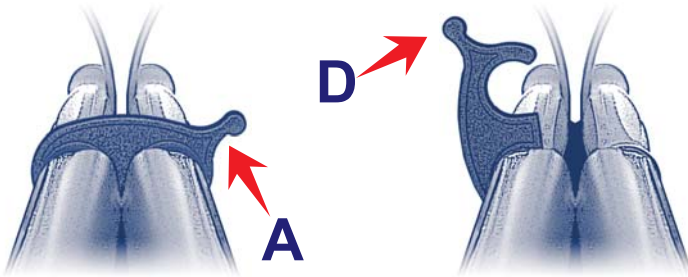

**Unfolding:**

- A** The lock clamp is on.  
Press upwards to open.
- B** Press the seat bars out and down until the rollator is locked in unfolded position.

**Folding:**

- C** Pull the strap and fold together.
- D** Press the lock clamp over the other seat bar to lock.

**Parking brakes:**

- E** Push *both* handles all the way down.  
Squeeze upwards to release.

**Driving brakes:**

- F** Squeeze *both* handles upwards.

**Tilt function:**




- G** Step on the pedal by the wheel and tilt the rollator over thresholds, edges etc.

**Height adjusting the handlebars:**

- H** Loosen the lock wheel.
- I** Adjust the height of the handlebar tube.
- J** Tighten the lock wheel again.

**See user manual:**

- Height adjustment with memory function.
- Safety.
- Trouble-shooting and other information.

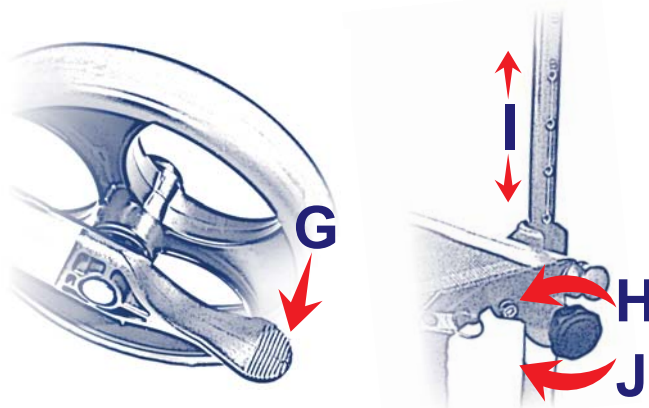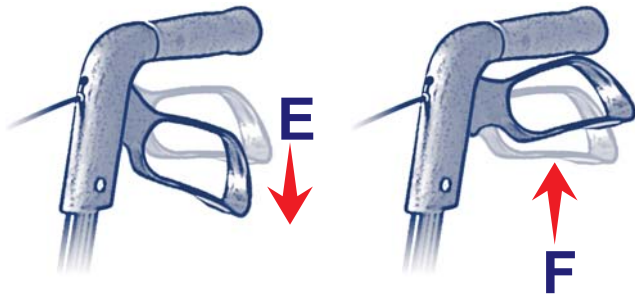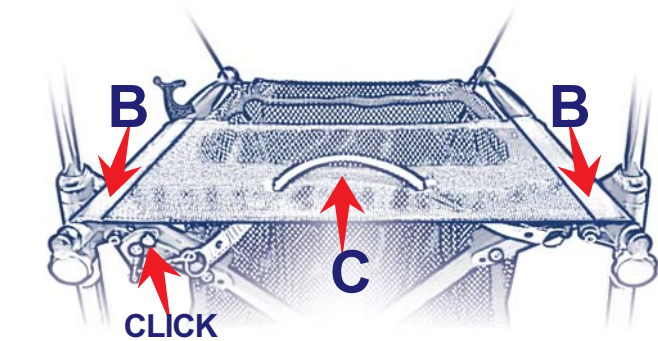

**Auseinanderfalten:**

- A** Verriegelung geschlossen.  
Nach oben drücken, um zu öffnen.
- B** Die Seitenstangen nach unten und aus-  
sen drücken, bis der Rollator einrastet.

**Zusammenfalten:**

- C** Ziehen Sie an der Greifschnur und  
der Rollator faltet sich zusammen.
- D** Drücken Sie die Verriegelung über die  
andere Seitenstange, um zu schliessen.

**Standbremse:**

- E** *Beide* Bremshebel ganz  
nach unten drücken.

**Fahrbremse:**

- F** *Beide* Bremshebel nach oben ziehen.

**Ankipphilfe:**

- G** Treten Sie auf die Ankipphilfe am  
Hinterrad, um dadurch Schwellen,  
Kanten u. ähnl. zu überwinden.

**Höheneinstellung der  
Handgriffe:**

- H** Sternschraube lösen.
- I** Die Höhe der Handgriffe einstellen.
- J** Sternschraube wieder gut festschrauben.

**In der Bedienungsanleitung  
finden Sie:**

- Höheneinstellung mit Memoryfunktion.
- Sicherheit.
- Fehlersuche und andere Informationen.